


取扱説明書

シャワーチェアー

■シャワーチェアー ミドルサポートタイプ(おりたたみ)

品番: VAL41701

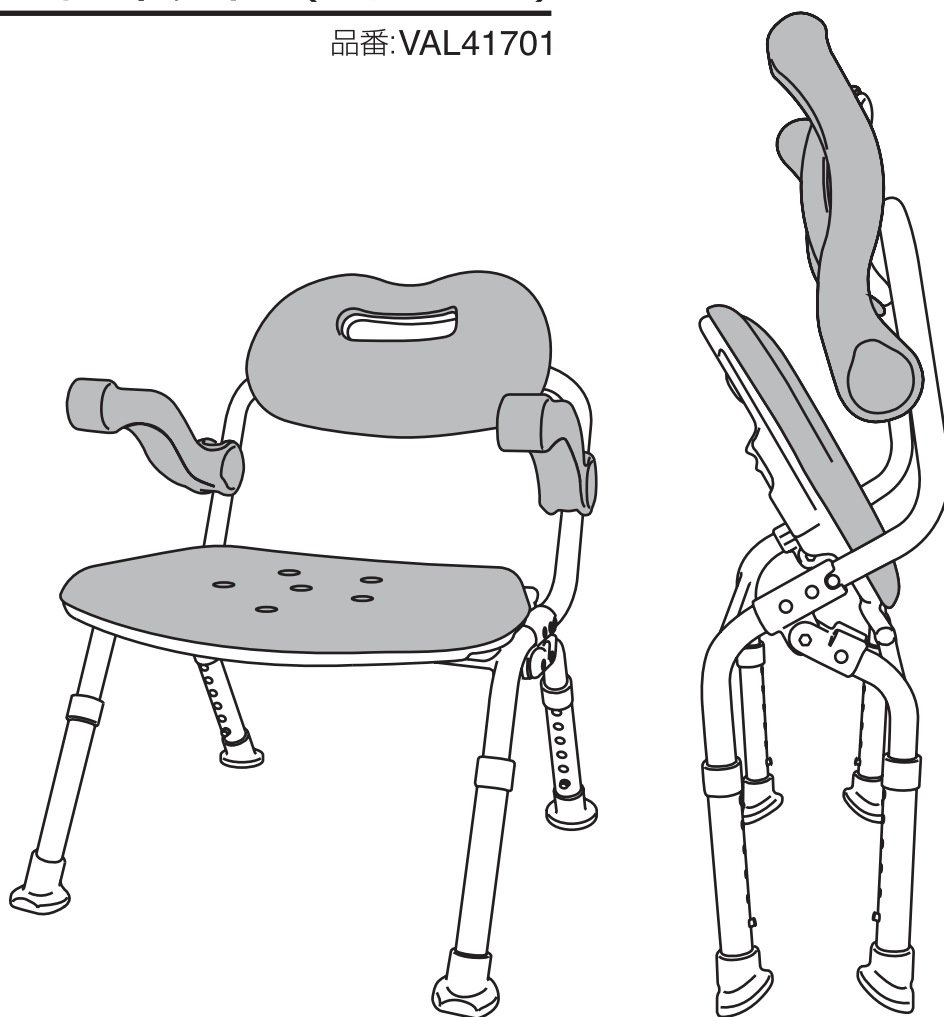

ご使用になる前に必ずお読みください。

最大使用者体重: 100kg以下

- 安全上のご注意 P2・3
- 各部のなまえ P4
- ご使用方法 P5・6
- お手入れ方法、寸法図 P7

- 仕様 P8
- 保証とアフターサービス、交換部品のご案内 P9
- お客様ご相談窓口のご案内 P10
- 保証書 P11・12

このたびは、シャワーチェアーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(P2・P3)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意 ① 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

 このような絵表示は、
気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

 このような絵表示は、
してはいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告



禁止 座面の上にとったり、脚を
かけたり、飛び乗ったり
しないでください。

転倒してケガをする
おそれがあります。



禁止 上体を後方に大きく傾け、
ひじかけに体重をかけすぎ
ないでください。

転倒してケガをする
おそれがあります。



禁止 シャワーチェアには、2人以上同時に
座らないでください。

転倒してケガをする
おそれがあります。




必ず実行 高さ調整時には、調整脚パイプの
調整ピンを確実に固定してください。

本体が不安定になり、転倒して
ケガをするおそれがあります。



注意 調整ピンをあまり強く押しすぎると、ボタンがもどらなくなるのでご注意ください。

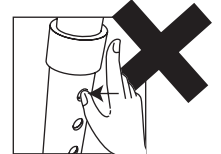

禁止 上体を後方に大きくのけぞらせて
背もたれに体重を
かけすぎないでください。

転倒(破損)してケガを
するおそれがあります。



禁止 故意にゆすらないでください。

本体が倒れてケガをする
おそれがあります。



必ず実行 浴室床の、平らで安定した場所に置いて
ご使用ください。

不安定な場所に置くと、転倒して
ケガをするおそれがあります。



禁止 体重が100kgを超える方は
使用しないでください。

本体が破損し、ケガをする
ことがあります。



必ず実行 4脚とも同じ高さに
調整してください。

本体が不安定になり、転倒して
ケガをするおそれがあります。



安全上のご注意 ② 必ずお守りください。


⚠ 注意



禁止

ひじかけを上げた状態で、ひじかけを引っ張ったり、持ち上げたりしないでください。


本体が破損し、ケガをするおそれがあります。

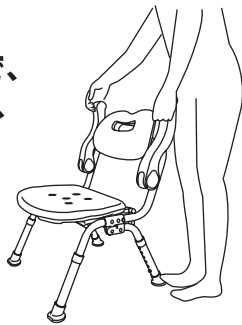

禁止

ひじかけを手すり代わりに持ち、横方向に力をかけないでください。

転倒し、ケガをするおそれがあります。

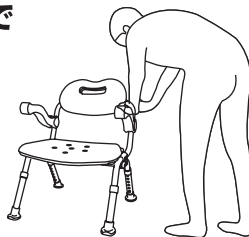

禁止

火気に近づけない。

火災や変形の原因となります。



禁止

屋外に放置したり、直射日光に当たったりしない。


色あせやひび割れの原因となります。



禁止

シャワーチェアを水中に沈めて使用したり、洗わないでください。

腐食の原因になりパイプが破損し、ケガをするおそれがあります。不安定になるため、ケガをするおそれがあります。

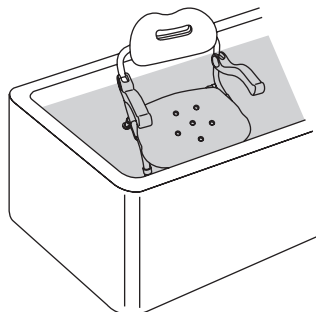

禁止

塩素系薬剤をかけての殺菌・消毒および、温泉水や硫黄系の入浴剤をかけての使用は行わないでください。

腐食の原因になりパイプが破損し、ケガをするおそれがあります。



禁止

熱湯をかけない。

変形や破損の原因となります。



禁止

タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤・シンナー・クレゾール等は使用しないでください。


プラスチックが劣化または破損し、ケガをするおそれがあります。



必ず実行

パイプと座面・背もたれを固定しているネジがゆるんでいないか定期的に確認してください。

ネジがゆるんでいる時は、六角レンチでネジを締め付けて直してください。ネジが外れると、転倒してケガをするおそれがあります。

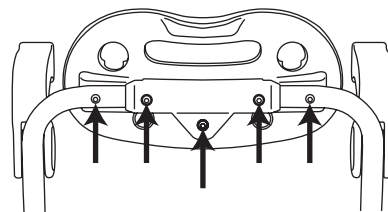

必ず実行

脚ゴムが確実に取り付けられていることを確認してください。

脚ゴムがはずれていると、滑りやすく、転倒してケガをするおそれがあります。また、浴室の床にキズがつく原因になります。



必ず実行

ご使用前、ご使用後は床やシャワーチェアについた石鹸やシャンプーを洗い流してください。


石鹸やシャンプーがついているとすべりやすく、転倒してケガをするおそれがあります。



必ず実行


座面が水平となっていることを確認してください。

水平でない状態で使用されると、チェアが不安定となり、転倒してケガをするおそれがあります。

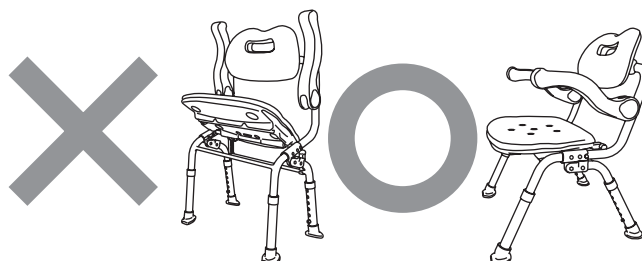

各部のなまえ

シャワーチェアー ミドルサポートタイプ(おりたたみ)

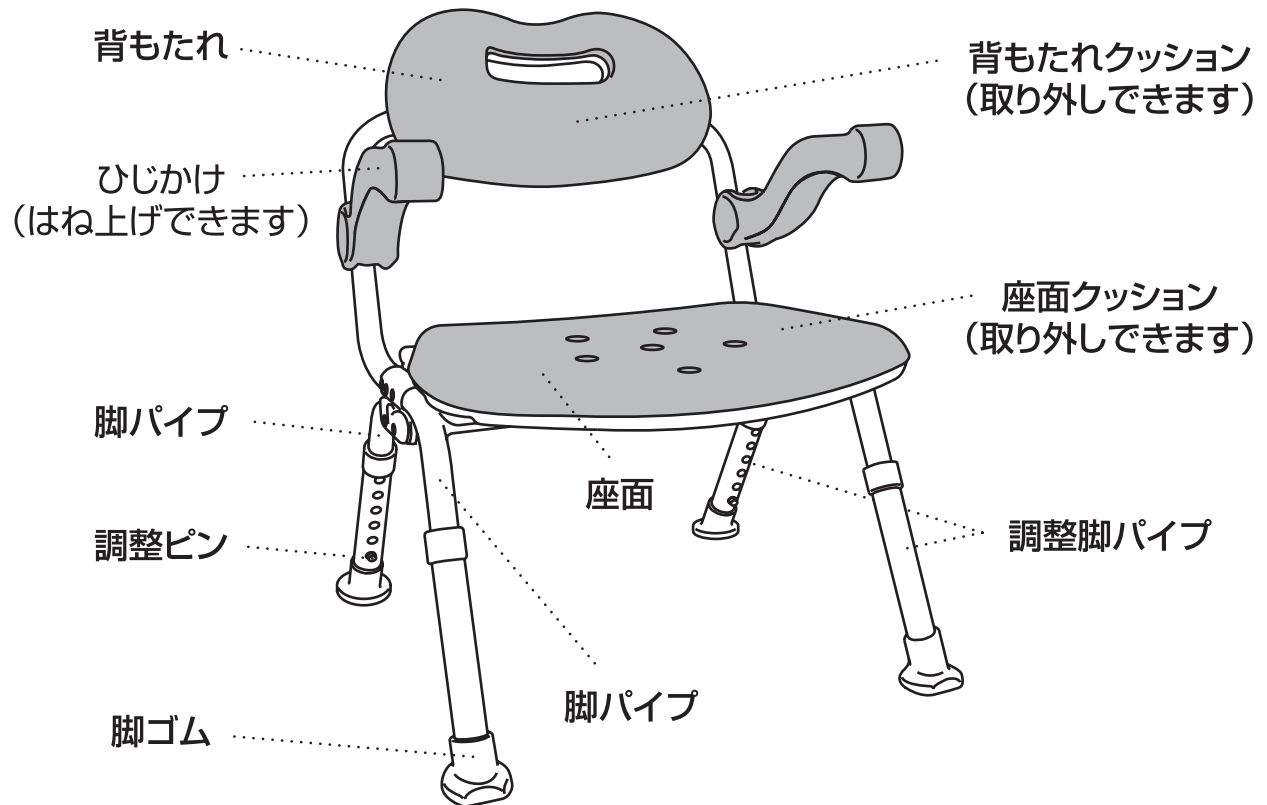


ご使用方法

- このシャワーチェアは浴室の洗い場でシャワーを浴びたり、体を洗ったりする際にご使用ください。
- 身体状況などに合わせて、使いやすい高さに座面の高さを調整してください。
座面高さは32～42cmのあいだで6段階で調整できます。(2cm間隔)

座面の高さ調整方法

調整ピンを押して、調整脚パイプを上下に動かし、使いやすい高さの穴に調整ピンを合わせてください。

- ① 4本の脚を同じ高さになるように、調整脚パイプをセットしてください。
- ② 調整脚パイプに脚ゴムがしっかりと入ってることを確認してください。
- ③ 調整ピンが隠れて見えない場合があります。その場合は、調整脚パイプを引っ張って取り外し、調整ピンの位置を確認後に取り付け直してください。

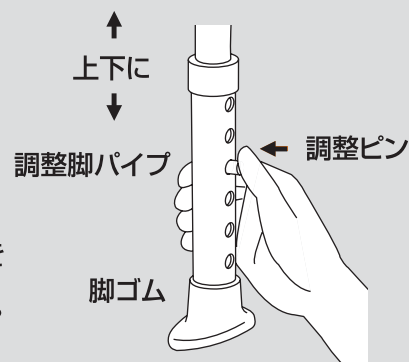

⚠ 注意


4脚とも同じ高さに調整してください。
本体が不安定になり、転倒してケガをするおそれがあります。

⚠ 警告


ご使用になる前に、各部の緩み、ガタつき、変形等がないか確認してください。
転倒してケガをするおそれがあります。

チェアのひらき方

- ① 背もたれを持って、座面を前方へ押し出してください。

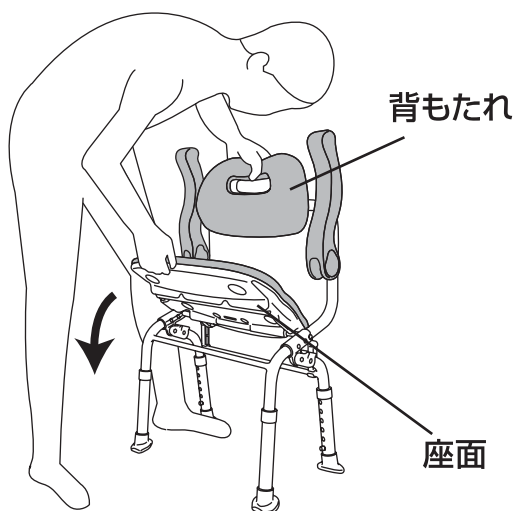

- ② 座面が水平になるまで、座面を押さえてください。

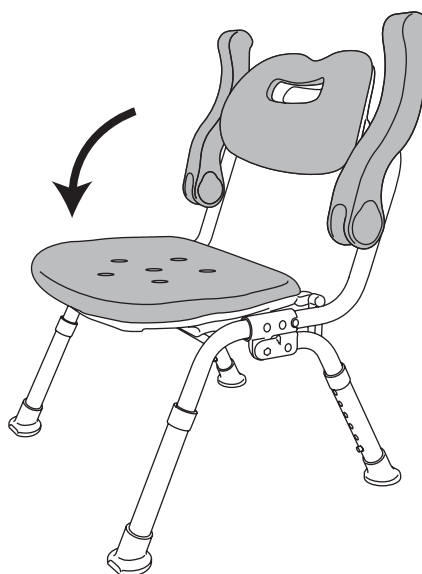

⚠ 警告



座面が水平となっていることを確認してご使用ください。
水平でない状態で使用されるとチェアが不安定となり、転倒してケガをするおそれがあります。

⚠ 警告


浴室床の、平で安定した場所に置いてご使用ください。
不安定な場所に置くと、転倒してケガをするおそれがあります。

チェアのおりたたみ方


① ひじかけをはね上げてください。

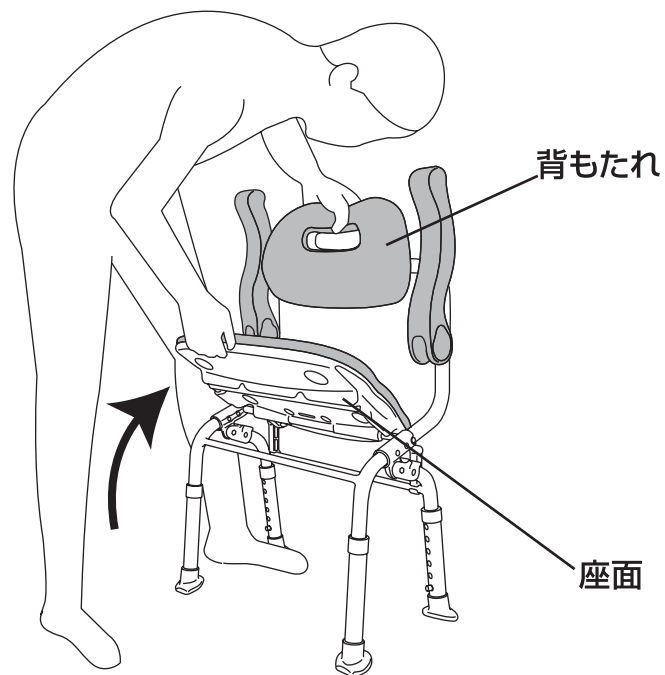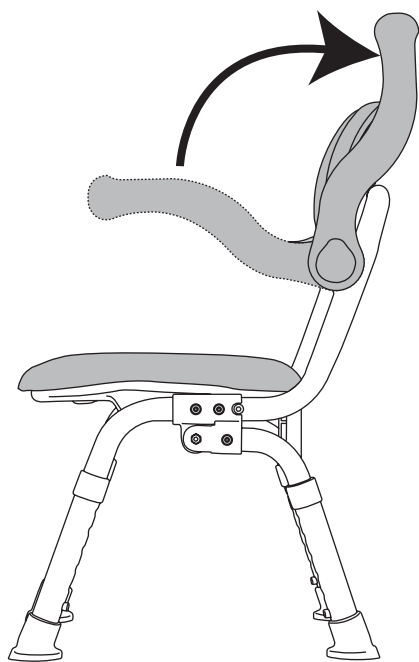

② 背もたれを持って
座面を上へ持ち上げてください。

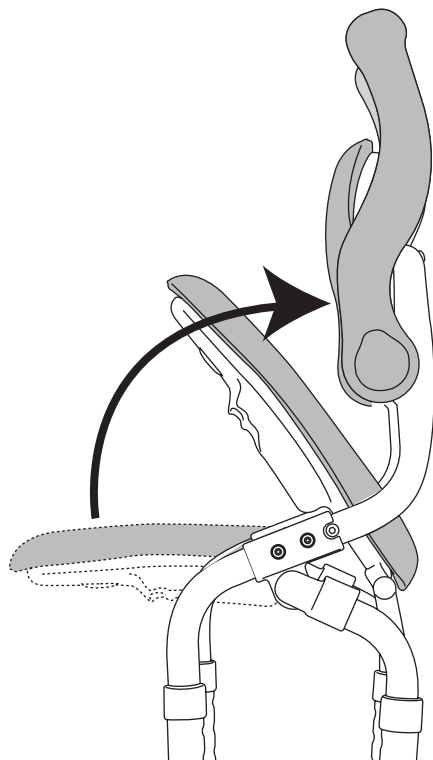

チェアは自立します。


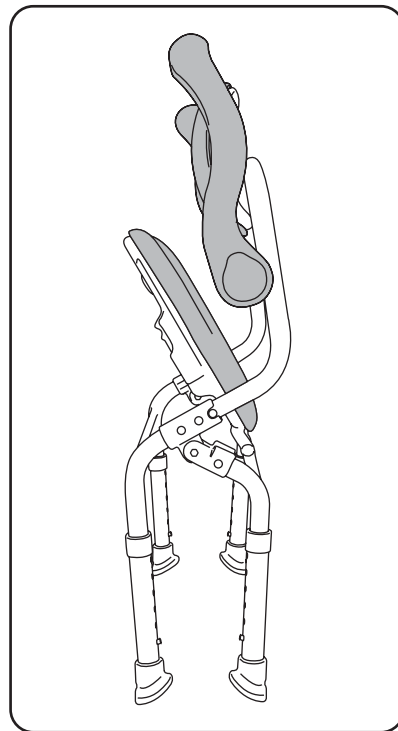


！ 注意

必ず片方の手で本体(背もたれ)を持って、座面を持ち上げてください。
本体が転倒してケガをするおそれがあります。

お手入れ方法

- 中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませて洗った後、水ふきし、乾いた布でふきとってください。
- 背もたれクッション、座面クッションは、取り外して洗うことができます。
- もとにもどすときは、クッションの凸を、それぞれ座面、背もたれの穴に、入れて押し込んでください。

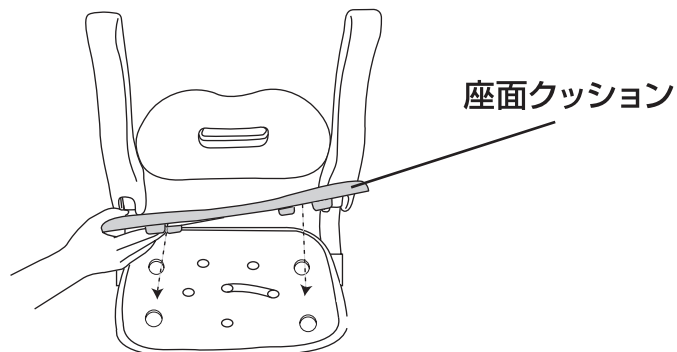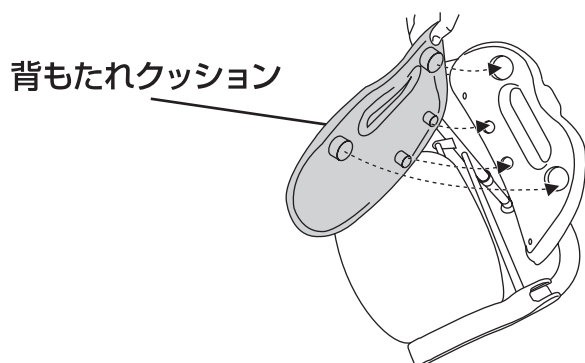

！注意

熱湯をかけないでください。
変形や破損の原因となります。

！注意

シャンプーや洗剤がクッションに付着すると、色あせすることがあります。


！注意

クッションがしっかり取り付けられているか確認してください。
取り付けできていない状態で使用すると、身体がすべったり、ケガをするおそれがあります。

！注意

タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しないでください。
プラスチックが劣化または破損し、ケガをするおそれがあります。

寸法図(cm)

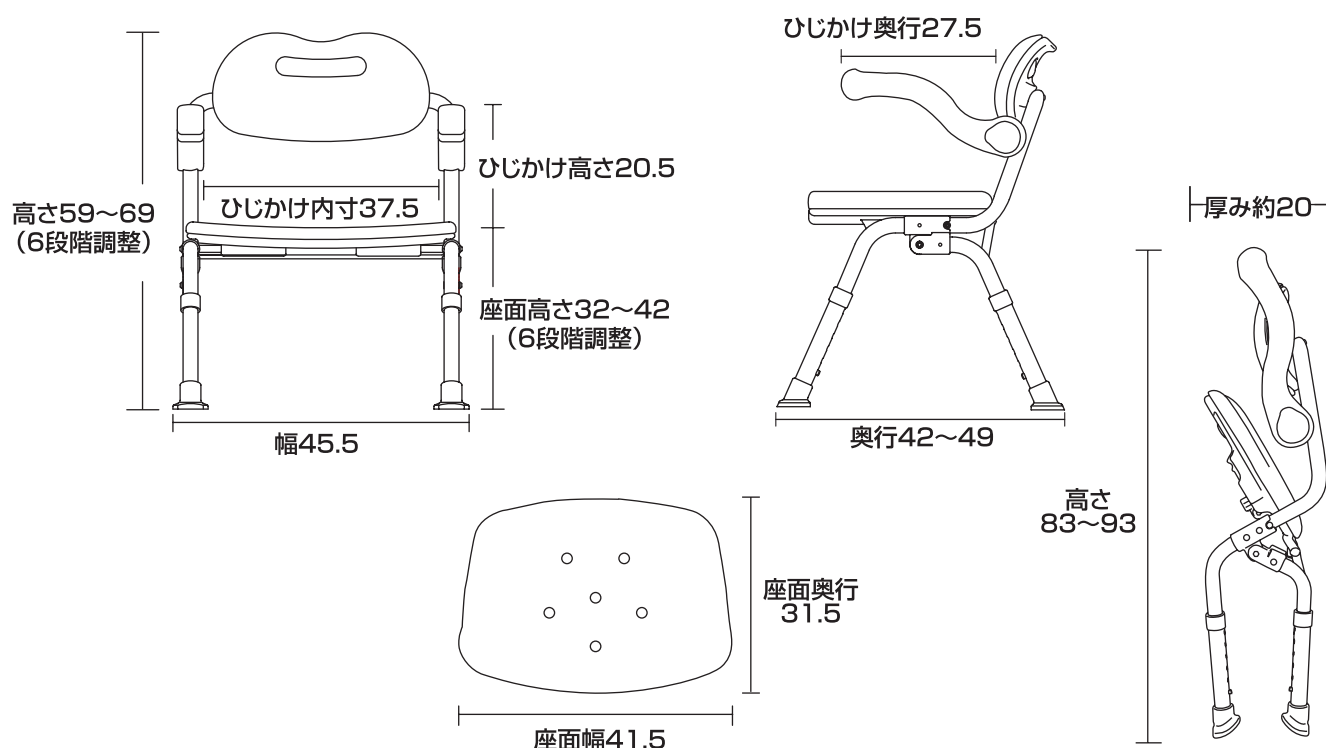

仕 様

シャワーチェアミドルサポートタイプ(おりたたみ)

製 品 名	シャワーチェアミドルサポートタイプ(おりたたみ)		
製 品 品 番	VAL41701		
色	A：ブルー D：オレンジ		
製 品 重 量	4.1kg		
サ イ ズ (cm)		ご使用時	おりたたみ時
	幅	45.5	45.5
	奥行	42～49	(厚み)20
	高さ	59～69	83～93
	座面高	32～42(6段階調整)	
材 質	背もたれ・座面：ポリエチレン、 背もたれクッション・座面クッション：EVA樹脂 ひじかけ:EVA樹脂、 脚パイプ：アルミニウム、 脚ゴム：エチレンプロピレンゴム		
最大使用者体重	100kg以下		

保証とアフターサービス

●保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間はご購入日より1年間です。

ただし、一般家庭用以外に使用された場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

●補修用性能部品の保有期間

当社はシャワーチェアの補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理を依頼されるとき

●保証期間中は

ご購入の販売店まで、品名、品番、ご購入日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、お電話番号をご連絡ください。保証の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

ご購入の販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

交換部品のご案内

背もたれクッション、座面クッションは、交換部品としてご購入いただけます。

部品名	色	部品品番	希望小売価格(税込価格)
背もたれクッション	オレンジ	VAL4170122D	3,150円
	ブルー	VAL4170122A	
座面クッション	オレンジ	VAL4170112D	3,675円
	ブルー	VAL4170112A	

公的介護保険制度購入対象商品


※申告の際にコピーまたは切り取ってご使用ください。

シャワーチェアー ミドルサポートタイプ (おりたたみ)

品番:

VAL41701A(ブルー)

VAL41701D(オレンジ)

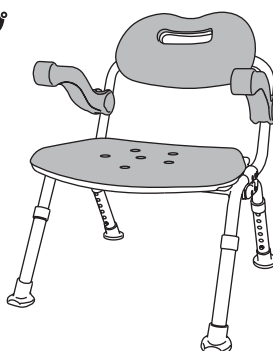

パナソニック
エイジフリーライフテック
株式会社

お客様ご相談窓口のご案内

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、
まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

商品・お取扱いなどのご相談は

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社



0120-365887

●受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日休み)

<http://panasonic.co.jp/hc/phcalt/>

西日本営業所 TEL.06(6908)8141 FAX.06(6908)4506

東日本営業所 TEL.03(6218)1235 FAX.03(6218)1236

パナソニック エイジフリーライフテック株式会社

本社 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 代表 TEL06(6908)8122